

Catalogue des analyses - Laboratoire

D-dimères

Informations générales

Examen

Indication diagnostique

Exclusion de l'embolie pulmonaire et/ou de la thrombose veineuse profonde CIVD

Ajout d'analyse

Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures

Renseignement téléphonique

021 31 44 200

Horaire de réalisation

24h/24

Analyse accréditée

OUI

Spécialité

- Hémostase

Synonyme

DDIME, D-dimères ELISA, PDF, produit de dégrad. fibrine

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999071

Lien

[023 - Hématologie hémostatse](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993


Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium

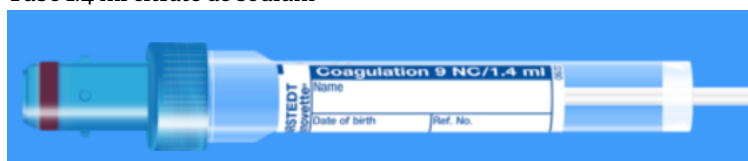

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaires d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaires d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Interprétation D-dimères ng/ml

Méthode analytique

Principe de la méthode • ELISA



Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire

24 heures

Tarif

Tarif (CHF)

28.8