Catalogue des analyses - Laboratoire

Monomères de fibrine

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Permet le diagnostic de la CIVD
Renseignement téléphonique	021 31 44 206
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Hémostase
Synonyme	CIVD, FM,
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien <u>023 - Hématologie hémostatse</u>
Formulaire de demande Renseignements à fournir	999071 Lien
	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de
Renseignements à fournir	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de
Renseignements à fournir Pré analytique	999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen
Renseignements à fournir Pré analytique Prélèvement Nature	1 Lien 1023 - Hématologie hémostatse Il est indispensable que le médecin fournisse une demande précise de ce test ou donne des renseignements médicaux sur le bon d'examen





Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande: 998993

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant 4h

Réfrigéré 12h si plasma séparé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

PréparationAucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3

heures sinon

Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour

les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvementsRéception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse

Bugnon 46


1011 Lausanne

Pneumatique 439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>
Analytique Prestataire	
Prestataire	Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00
Téléphone	021 31 44 206
Astreinte	Hémato moléculaire-hémostase
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Monomère de fibrine : négatif ou positif Prestations simultanées: TP;PTT, TT, FI Généralement associés aux D-dimères.
Méthode analytique	
Principe de la méthode	Agglutination



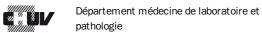

Post analytique

Conservation après examens

6 mois Aliquote congelé

Tarif

28.8 Tarif (CHF)

