

Catalogue des analyses - Laboratoire

Temps de thromboplastine partielle activée

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Cette analyse peut-être ajoutée à une demande existante dans un délai de 4 heures
Renseignement téléphonique	021 31 44 200
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none"> Hémostase
Synonyme	APTT, APTT=Activated Partial Thromboplast, héparine, PTT, PTT=Partial Thromboplastin Time, TCA, temps coagulation, temps de céphaline activée, temps thromboplastine part. activée
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999071 Lien 023 - Hématologie hémostatse
Renseignements à fournir	Cocher si patient à reçu de l'héparine

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium

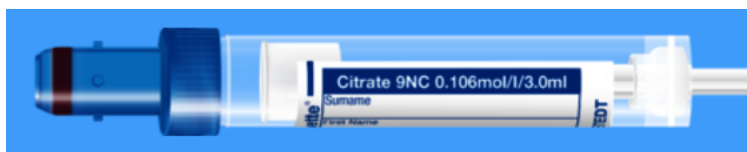

Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998993

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Les mêmes tubes suffisent

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU - N° commande : 998998

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

4h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au chuv est < 3 heures
sinon
Centrifuger 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

Conservation

Aliquots à -20°C

Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception

Lundi-vendredi : 6h30-18h30
Samedi : 6h30-15h30
Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00

Téléphone 021 31 44 280

Astreinte En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH

Site web [Réception des laboratoires](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Hématologie générale 24/7

Site BH18-100

Adresse Rue Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24h/24

Téléphone 021 31 44 200

Site web [Hématologie générale 24/7](#)

Résultats

Délai de rendu < 2h

Méthode analytique

Principe de la méthode • Néphélémétrie

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire 24 heures

Tarif

Tarif (CHF) 7.83