Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00456

V13 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Oxcarbazepine

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube sur la glace
- Condition particulière d'acheminement

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin du métabolite actif: hydroxy-carbazepine (OH-carb) (intervalle de référence disponible). L'oxcarbazepine (prodrogue) est quasi immédiatement et totalement transformée en OH-carb.
Indication diagnostique	Sur avis du spécialiste. L'interprétation clinique (TDM) du dosage n'est actuellement pas validée.
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 25 00
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/jour
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Trileptal
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien <u>016 - Pharmacologie clinique</u>
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament, début du traitement ou de dernier changement posologique



Pré analytique

Prélèvement


· Sang veineux **Nature**

Délai de prélèvement: juste avant la dose suivante Instruction(s) particulière(s) Délai d'équilibration: 3 jours à posologie constante

Matériel standard

1 Quantité

Tube 4.9 ml EDTA-K **Contenant**

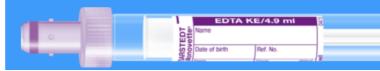

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Tube 4.9 ml sérum sans gel Contenant(s) autre(s)

Adulte: si >3 analyses de PCL8, voir avec labo Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.3 ml EDTA-K **Contenant**

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Microtube 0.3 ml sérum sans gel Contenant(s) autre(s)

Microtube bien rempli. **Volume minimum**

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

8h **Ambiant**

72h Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et **décanter sans délai** le **Préparation**

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.



Conservation	Plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -20°C	
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi or fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congr PP:439	
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Délai de rendu	< 24h
Interprétation	Jours ouvrables et prélèvement reçu avant 13h.
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• LC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	126



Prestation Tarmed

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min