



Catalogue des analyses - Laboratoire

Doxycycline

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Formulaire annexe à remplir (voir rubrique Informations Générales - Prescription)

Informations générales

Examen

But de l'analyse

DOSAGES DES ANTI-INFECTIEUX

Indication diagnostique

Pour évaluer l'efficacité et/ou un sous dosage ou surdosage : Doser un Résiduel dans les 30 min avant la prise et un Pic 2h à 4h après la prise.
Pour évaluer la compliance, une malabsorption : Doser un pic 2h à 4h après la prise.

Renseignement téléphonique

021 31 44 280

Spécialité

- Externalisé

Synonyme

VIBRAMYCINE

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

Lien

[PARIS-ST-JOSEPH-DOSAGES-DES-ANTI-INFECTIEUX](#)

Renseignements à fournir

Pour chaque prélèvement indiquer sur le tube la date et l'heure ainsi que la ou les molécules dosées sur ce prélèvement.
Doser un Résiduel dans les 30 min avant la prise et un Pic 2h à 4h après la prise.

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux


Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

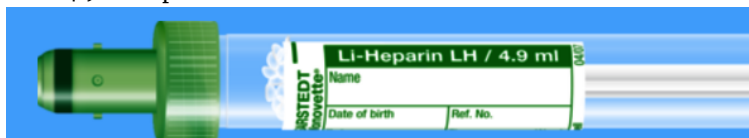

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml EDTA

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Tube 2.6 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation

Plasma: Idéalement à -80°C , sinon à -20°C

Conditions d'acheminement

Plasma (EDTA ou hépariné) centrifugé et décanté dans les 8h après le prélèvement, congelé à -20°C . Acheminement congelé

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
Téléphone	021 31 44 280
Astreinte	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
Site web	<u>Réception des laboratoires</u>