Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00514

V19 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Tamoxifen-Endoxifen**

Sang



# Informations générales

#### Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin du tamoxifène (pro-drogue), et son métabolites actif l'endoxifène (intervalle de référence disponible)
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Spécialité	Dosages de médicaments
Synonyme	Tamoxifen®
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement posologique si <30j)



### Pré analytique

#### **Prélèvement**

· Sang veineux **Nature** 


Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 6h post-dose) Instruction(s) particulière(s)

Délai d'équilibration: dès 1 semaine à poslogie constante

**Matériel standard** 

1 Quantité

Tube 4.9 ml EDTA-K **Contenant** 

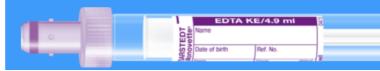

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999013

Sérum sans gel 4.9 ml Contenant(s) autre(s)

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

1

Matériel pédiatrique

Quantité

Microtube 0.5 ml EDTA-K **Contenant** 

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Microtube 0.3 ml sérum sans gel Contenant(s) autre(s)

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec **Volume minimum** 

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

48h **Ambiant** 

48h Réfrigéré

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le **Préparation** plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

A Toamb: Sang Conservation



	complet ou plasma max 48h jusqu'à réception au laboratoire. Sinon congeler le plasma: Idéalement à -80°C, sinon à -	-20°C
Conditions d'acheminement	Congelé Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Réception du matériel les jours ouvrables, le vendredi o fériés jusqu'à 15h00. Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et cong PP:439	-
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	<u>Réception des laboratoires 24/24</u>	



## **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Interprétation	<48h dès résultat
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	
Conservation après examens	
Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	126
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

