



Catalogue des analyses - Laboratoire

# Rivastigmine

Sang



## Informations générales

### Examen

<b>But de l'analyse</b>	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
<b>Indication diagnostique</b>	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
<b>Préparation du patient</b>	Le patient doit être informé que cette analyse ne figure pas sur la liste des analyses en vigueur et qu'elle ne sera pas obligatoirement prise en charge par les caisses maladie
<b>Renseignement téléphonique</b>	021 31 42 264
<b>Horaire de réalisation</b>	Heures ouvrables du laboratoire
<b>Fréquence d'exécution</b>	1x/semaine
<b>Analyse accréditée</b>	NON
<b>Spécialité</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dosages de médicaments</li></ul>
<b>Prescription</b>	
<b>Formulaire de demande</b>	<b>Numéro de commande</b> <b>Lien</b> <u>UPPC – Analyse de médicaments psychotropes</u>
<b>Renseignements à fournir</b>	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques

## Pré analytique

### Prélèvement

**Nature**

- Sang veineux

**Instruction(s) particulière(s)**


Prélèvement 60-90 min après la prise du médicament (formes orales), ou 1 h avant de changer le patch.  
Délai d'équilibration après le dernier changement de posologie : 1 jour (oral), 1 semaine (patch)  
Ne pas prélever le vendredi, ni le samedi (pas stable même à 4°C durant le week-end)

**Matériel standard****Quantité**

1

**Contenant**

Tube 2.7 ml fluorure

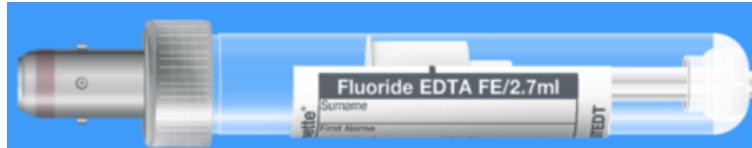

Monovette ISO bouchon GRIS - N° commande : 999006

**Stabilité maximale avant envoi****Réfrigéré**

Nuit et we

**Traitements du prélèvement pour requérants externes****Préparation**

Envoyer tube de sang complet, ne pas centrifuger

**Conservation**

4°C

**Conditions d'acheminement**

Température ambiante, courrier A

**Acheminement****Conditions d'acheminement**

Site de Cery : Amener directement au laboratoire UPPC

**Dépose des prélèvements**

Site de CERY : Réception du laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100

**Site**

Hôpital de Cery

**Adresse**Cery  
1008 Prilly



---

**Horaire d'ouverture de la réception** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 31 42 264

---

**Site web** [UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique](#)

---

## Analytique

### Prestataire

---

**Prestataire** Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique  
(UPPC)

---

**Site** Hôpital de Cery

---

**Adresse** Hôpital de Cery  
1008 Prilly

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : fermé

---

**Téléphone** 021 31 42 264

---

### Méthode analytique

#### Principe de la méthode

- UPLC-MS/MS

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 3 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 126