



Catalogue des analyses - Laboratoire

Acide aminé spécifique

Sang

Information(s) importante(s)

Attention

- Acheminer immédiatement le tube

Informations générales

Examen

Préparation du patient Patient à jeun (>4h après le dernier repas)

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation Heures ouvrables du laboratoire et service de piquet

Fréquence d'exécution 1x/jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité

- Chimie clinique

Synonyme Acide aminé, Acides aminés, aminés (acides ...) Aminoacides

Prescription

Formulaire de demande **Numéro de commande**
999069
Lien
[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Renseignements à fournir Noter l'acide aminé sous commentaires

Pré analytique

Prélèvement


Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml héparinate de lithium

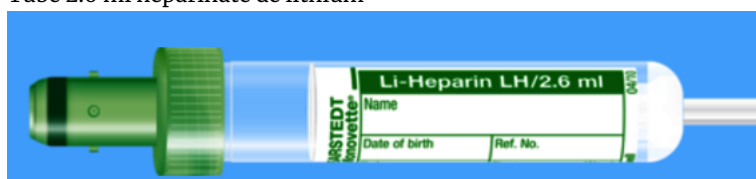

Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 999007

Volume minimum

150 µl de plasma

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum

70 µl de plasma

Stabilité maximale avant analyse

Ambiant

15 min

Réfrigéré

15 min

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Centrifuger durant 5 minutes, à 15°C, 3600g
Maximum 15 minutes après le prélèvement.
Décanter le plasma, volume minimum: 0.15ml de plasma.

Conservation

Conserver dans le congélateur à -80°C

Conditions d'acheminement

Envoi sur glace sèche ou neige carbonique

Acheminement

Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires

Site

BH18-100

Adresse

Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique

439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode

- LC-MS

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 53.1

Condition(s) spéciale(s) Validité dès le 01.07.2009. Supplément selon la liste des analyses facturables en sus