Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA_INV_01_00617

V18 - 22/10/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

ACTH (corticotrophine)

Sang



Information(s) importante(s)

Attention

• Acheminer immédiatement le tube sur la glace

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	Non
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Adrénocorticotrophine, corticostimuline, hormone corticotrope
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien <u>010 - Chimie clinique - Sang</u>



Pré analytique

Prélèvement

Nature

· Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)

Obtention du contenant :

Pour les adultes, le tube BD Vacutainer 5 ml EDTA-K3/aprotinin s'obtient à la Réception des laboratoires.

Prélèvement et acheminement :

- refroidir le tube sur de la glace pilée
- bien remplir le tube et éviter toute hémolyse
- acheminer le prélèvement dans les 15 minutes au laboratoire pour que le plasma puisse être séparé et congelé dans les plus brefs délais après la prise de sang.NB : L'acheminement immédiat sur glace pilée est encore plus important pour les tubes EDTA ne contenant pas d'aprotinine

Matériel standard

Quantité

1

Contenant

Tube BD Vacutainer 5 ml EDTA-K3/aprotinin



Bouchon rose sur demande au 44280, un tube de 2 ml peut être préparé

Volume minimum


Le tube refroidi sur glace doit être bien rempli

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

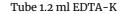



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 998995

Volume minimum

Le tube refroidi sur glace doit être bien rempli et IMMÉDIATEMENT trai laboratoire pour que le plasma puisse être séparé et congelé dans les plu



Mataria	naans	TAIAGIA
Matérie	Hevila	LUIUEIE

Ouantité		

Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Volume minimum	Le tube refroidi sur glace doit être BIEN REMPLI et IMMEDIATEMENT transmis au laboratoire pour que le plasma puisse être séparé et congelé dans les plus brefs délais

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Eviter l'hémolyse (sous-estimation du résultat). Immédiatement centrifuger et décanter le plasma : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.3 ml	
Conservation	Immédiatement congeler le plasma à -20°C	
Conditions d'acheminement	à -20°C	
Acheminement		
Conditions d'acheminement	Envoyer le tube sur glace pilée par porteur au maximum minutes suivant le prélèvement.	dans les 15
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24	



Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• ECLIA
Analyseur	cobas e 411 / Roche Diagnostics
Post analytique	
Conservation après examens	
Aliquote congelé	1 an
Tarif	

61.2



Tarif (CHF)