

Catalogue des analyses - Laboratoire

# bêta-hCG totale

Sang

## Informations générales

### Examen

#### Indication diagnostique

- pour le **test et le suivi de grossesse**  
- hors grossesse, comme **marqueur tumoral**  
*Pour le dépistage prénatal de la **trisomie 21 au 2ème trimestre**,  
consulter la fiche correspondante "Dépistage de la trisomie 21 et de la  
NFTN - 2ème trimestre".*

#### Ajout d'analyse

possible si sérothèque existante

#### Renseignement téléphonique

021 31 44 121

#### Horaire de réalisation

24h/24

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Chimie clinique

#### Synonyme

sous-unité bêta de l'hormone chorionique gonadotrope humaine

#### Prescription

#### Formulaire de demande

**Numéro de commande**

061219

**Lien**

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux


#### Matériel standard

#### Quantité

1

#### Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium

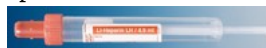

Monovette bouchon orange - N° commande : 510208

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

**Matériel pédiatrique**

**Quantité**

1

**Contenant**

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium



Microvette bouchon orange - N° commande : 511158

**Volume minimum**

1 microtube bien rempli  
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

**Règle(s) si cumul avec d'autres analyses**

Augmenter le nombre de microtubes

**Stabilité maximale avant envoi**

**Réfrigéré**

24h

**Traitement du prélèvement pour requérants externes**

**Préparation**

Centrifuger et décanter le plasma :  
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml  
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

**Conservation**

A 4°C

**Conditions d'acheminement**

Envoyer le plasma à T° ambiante

**Acheminement**

**Dépose des prélèvements**

Réception des laboratoires

**Site**

BH18-100

**Adresse**

Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Pneumatique**

439

**Horaire d'ouverture de la réception**

24h/24

**Téléphone**

021 31 44 280



**Site web** [Réception des laboratoires 24/24.](#)

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire de chimie clinique

---

**Site** BH18-100

---

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

---

**Tube pneumatique** 439

---

**Horaire d'ouverture du laboratoire** 24/24H

---

**Téléphone** 021 31 44 121

---

**Site web** [Chimie clinique](#)

### Méthode analytique

**Principe de la méthode**

- ECLIA

---

**Analyseur** cobas e 801 / Roche Diagnostics

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 1 an

### Tarif

**Tarif (CHF)** 15.8