Catalogue des analyses - Laboratoire

CEA

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence et/ou horaire d'exécution	Jours ouvrables : 1x / jour
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Chimie clinique
Synonyme	ACE, antigène carcinoembryonnaire

Prescription

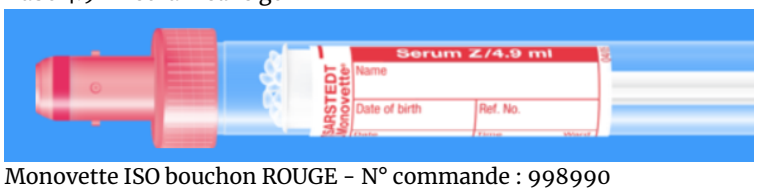
Formulaire de demande	**Numéro de commande** 999069 **Lien** 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature	• Sang veineux

Matériel standard

Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml sérum sans gel  Monovette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 998990
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Jusqu'à 3 analyses sur sérum, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité	1
Contenant	Microtube 0.3 ml sérum



Microvette ISO bouchon ROUGE - N° commande : 999002

Volume minimum	1 microtube bien rempli. (pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)
Règle(s) si cumul avec d'autres analyses	Augmenter le nombre de microtubes.

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger et décanter le sérum : - volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml - volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml
Conservation	Conserver le sérum à 4°C; si > 24 h, congeler à -20°C
Conditions d'acheminement	Par transporteur : à T° ambiante Par poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Résultats

Délai de rendu	< 24h

Méthode analytique

Principe de la méthode	• CMIA
Analyseur	Architect i / Abbott

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	1 an

Tarif

Tarif (CHF)	18