

Catalogue des analyses - Laboratoire

C-peptide

Sang

Informations générales

Examen

Indication diagnostique	Attention! Si demande concomitante avec l'insuline, ce sont les conditions préanalytiques de l'insuline qui prévalent !
Préparation du patient	A jeun pour taux basal
Ajout d'analyse	possible si sérothèque existante
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	<ul style="list-style-type: none">• Chimie clinique
Synonyme	peptide-C
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999069 Lien 010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature

- Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium




Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

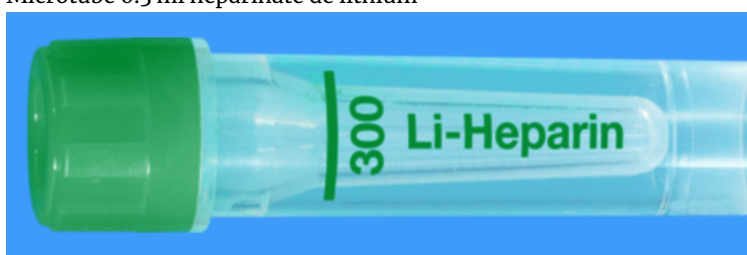

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum 1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation Conserver à 4 °C; si > 24 h, congeler à -20°C

Conditions d'acheminement A 4°C si l'acheminement se fait dans les 24 h, sinon à -20°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Résultats

Délai de rendu 2-3 jours

Méthode analytique

Principe de la méthode • ECLIA

Analyseur cobas e 411 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 33.3