Catalogue des analyses - Laboratoire

DLA\_INV\_01\_00710

V16 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

# **Everolimus**

Sang



# Informations générales

#### **Examen**

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin d'everolimus (intervalle de référence greffe dépendant).
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, suspicion de taux insuffisant, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse.
Renseignement téléphonique	021 31 44 121
Fréquence d'exécution	1x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Chimie clinique
Synonyme	Certican, SDZ RAD
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 999070 Lien 013 - Chimie clinique - Médicaments
Renseignements à fournir	Documenter l'heure réelle de la prise de sang et, pour une adaptation posologique, remplir scrupuleusement toutes les rubriques.

# Pré analytique


#### **Prélèvement**

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	<ul> <li>Délai d'équilibration : 4-5 jours à posologie constante</li> <li>Délai de prélèvement : juste avant la dose suivante (min. 8 h postdose)</li> </ul>
Matériel standard	
Quantité	1

#### Contenant





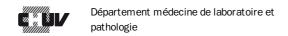

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999009

Matériel	pédi	iatrique
----------	------	----------

	1
Ouantité	-

	Microtyka o 5 ml EDWA V
Contenant	Microtube 0.5 ml EDTA-K
	Microtainer bouchon mauve - N° commande : 500434
Volumo minimum	0.3 ml

### **Volume minimum**

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

Conservation	Conserver le sang complet à 4°C (vol. min. 0.3 ml)	
Conditions d'acheminement	A T° ambiante si l'acheminement se fait dans les 8 heures, sinon à 4°C	
Acheminement		
Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires	
Site	BH18-100	
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne	
Pneumatique	439	
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24	
Téléphone	021 31 44 280	
Site web	Réception des laboratoires 24/24.	



### **Analytique**

#### **Prestataire**

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique	
Site	BH18-100	
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne	
Tube pneumatique	439	
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H	
Téléphone	021 31 44 121	
Site web	<u>Chimie clinique</u>	
Résultats		
Interprétation	Obtention des résultats: le mercredi pour les prélèvements reçus le mardi avant 12h00.  Interprétation par la Pharmacologie clinique: durant les heures ouvrables par le consultant TDM (021 31 42 500), sinon sur demande au piquet de pharmacologie clinique en cas d'urgence.	
Méthode analytique		
Principe de la méthode	• LC-MS/MS	
Technique	Mesure après extraction du sang complet	
Post analytique		

135



Tarif

Tarif (CHF)

**Prestation Tarmed** 

Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min