



Catalogue des analyses - Laboratoire

FSH

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Horaire de réalisation 24h/24

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme hormone folliculo-stimulante

Prescription

Formulaire de demande

Numéro de commande

999069

Lien

[010 - Chimie clinique - Sang](#)

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant

Tube 4.9 ml héparinate de lithium



Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses


Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 1

Contenant

Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

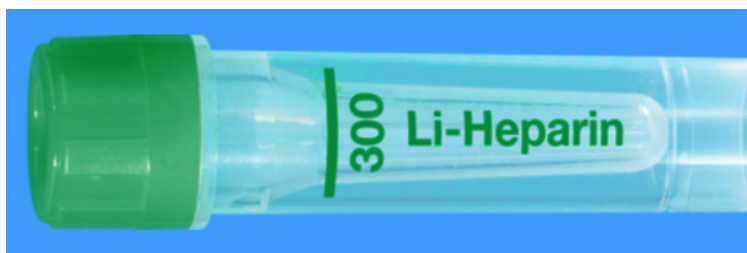

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum 1 microtube bien rempli
(pour les demandeurs externes : 2 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.2 ml

Conservation Conserver le plasma à 4°C

Conditions d'acheminement à T° ambiante

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web [Réception des laboratoires 24/24](#)

Analytique

Prestataire

Prestataire	Laboratoire de chimie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	24/24H
Téléphone	021 31 44 121
Site web	Chimie clinique

Méthode analytique

Principe de la méthode	<ul style="list-style-type: none">ECLIA
Analyseur	cobas e 801 / Roche Diagnostics

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé	3 mois
Tarif	
Tarif (CHF)	15.4