



Catalogue des analyses - Laboratoire

Testostérone

Sang

Informations générales

Examen

Ajout d'analyse possible si sérothèque existante

Renseignement téléphonique 021 31 44 121

Fréquence et/ou horaire d'exécution Jours ouvrables : 1x / jour

Analyse accréditée OUI

Spécialité • Chimie clinique

Synonyme Testostérone totale

Prescription

Formulaire de demande Numéro de commande
999069
Lien
010 - Chimie clinique - Sang

Pré analytique

Prélèvement

Nature • Sang veineux

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 4.9 ml héparinate de lithium




Monovette ISO bouchon VERT - N° commande : 998991

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Jusqu'à 3 analyses sur héparinate de lithium, le même tube suffit

Matériel pédiatrique

Quantité 2

Contenant Microtube 0.3 ml héparinate de lithium

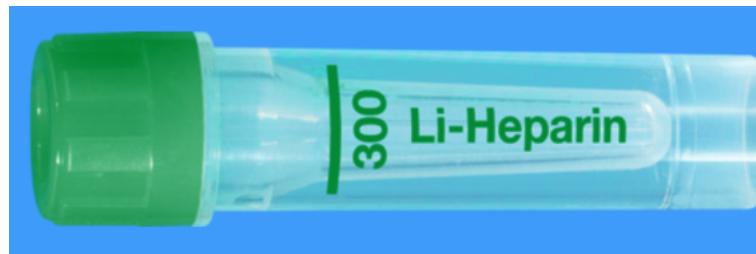

Microvette ISO bouchon VERT - N° commande : 999003

Volume minimum 2 microtubes bien remplis
(pour les demandeurs externes : 3 microtubes bien remplis)

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses Augmenter le nombre de microtubes

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation Centrifuger et décanter le plasma :
- volume idéal (y compris sérothèque) : 1 ml
- volume minimum pour l'analyse seule : 0.4 ml

Conservation A 4°C si < 24 h, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement - par transporteur : à T° ambiante
- par poste : à 4°C

Acheminement

Dépose des prélèvements Réception des laboratoires

Site BH18-100

Adresse Bugnon 46
1011 Lausanne

Pneumatique 439

Horaire d'ouverture de la réception 24h/24

Téléphone 021 31 44 280

Site web Réception des laboratoires 24/24

Analytique

Prestataire

Prestataire Laboratoire de chimie clinique

Site BH18-100

Adresse Rue du Bugnon 46
1011 Lausanne

Tube pneumatique 439

Horaire d'ouverture du laboratoire 24/24H

Téléphone 021 31 44 121

Site web [Chimie clinique](#)

Méthode analytique

Principe de la méthode • CMIA

Analyseur Architect i / Abbott

Post analytique

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF) 17.4