Catalogue des analyses - Laboratoire

Agglutinines froides

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Bilan d'anémie immuno-hémolytique, suspicion d'infection par mycoplasme, CMV ou EBV
Renseignement téléphonique	021 31 44 201
Horaire de réalisation	24h/24
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	• Immuno-hématologie
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande 061244 Lien 033 - Unité de médecine transfusionnelle
Recommandations	Complément d'informations sur Tribu et sur le site internet de l'UMT (https://www.itransfusion.ch/fr/home)



Pré analytique


Prélèvement

• Sang veineux

Matériel standard

Quantité

Contenant Tube 4.9 ml EDTA-K

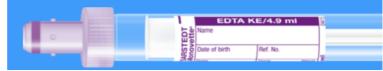

Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Matériel pédiatrique

Quantité

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant Oui

Réfrigéré Non

Congelé

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation

Incuber un des tubes 2 heures à 37°C, le décanter puis envoyer le

plasma et le culot de globules rouges. Ne pas réfrigérer.

Acheminement

Conditions d'acheminement

Acheminer les prélèvements dans les plus brefs délais en les

protégeant des variations de température. NE PAS RÉFRIGÉRER.

Dépose des prélèvementsUnité de médecine transfusionnelle



Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	549 PP07
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 314 65 67
Astreinte	021 314 65 67
Site web	<u>UMT</u>

Analytique

Prestataire

Prestataire	Unité de médecine transfusionnelle
Site	BH 18 606
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Horaire d'ouverture du laboratoire	24h/24
Téléphone	021 314 657
Astreinte	UMT
Résultats	
Délai de rendu	1-2 jours



Méthode analytique

Principe de la méthode

• Manuelle en tubes

Post analytique

Tarif

Tarif (CHF) 26.5

Condition(s) spéciale(s)En fonction des résultats, des examens complémentaires peuvent être

