Catalogue des analyses - Laboratoire DLA_INV_01_01656 V6 - 07/12/2025

Catalogue des analyses - Laboratoire

Doravirine

Sang



Informations générales

Examen
CAGIIICII

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique (TDM) de taux sanguin de doravirine(intervalle de référence disponible)	
Indication diagnostique	Suivi thérapeutique, réponse insatisfaisante, suspicion de toxicité, suspicion d'interaction médicamenteuse, doute sur la compliance, grossesse, étude	
Renseignement téléphonique	Laboratoire: 021 314 42 71 Interprétation des taux (TDM): 021 314 14 04	
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire	
Fréquence d'exécution	1x/semaine	
Spécialité	Dosages de médicaments	
Synonyme	Pifektro®, dans Delstrigo®	
Prescription		
Formulaire de demande	Numéro de commande Info Disponible au laboratoire et à la réception des laboratoires, Desk BH 18-100, tél 44 280 Lien 016 - Pharmacologie clinique	
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques. Notamment, indiquer impérativement la date et heure de: prise de sang, dernière prise de médicament (+début du traitement ou de dernier changement	

Pré analytique

Prélèvement

Nature	Sang veineux
Instruction(s) particulière(s)	Délai de prélèvement: avant la dose suivante (min 4-5h post-dose) Délai d'équilibration: 4 semaines à posologie constante
Matériel standard	
Quantité	1
Contenant	Tube 4.9 ml EDTA-K





Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande : 999013

Contenant(s) autre(s)

Tube 4.9 ml sérum sans gel

Règle(s) si cumul avec d'autres analyses

Si >3 analyses effectuées par PCL8, voir avec labo

Matériel pédiatrique

Quantité

1

Contenant

A STATE OF THE STA

Microtainer bouchon mauve - N° commande: 500434

Contenant(s) autre(s)

Microtube 0.3 ml sérum sans gel

Microtube 0.5 ml EDTA-K

Volume minimum

Si cumul d'examens: augmenter le nombre de microvettes, voir avec

labo (44 271)

Stabilité maximale avant envoi

Ambiant

48h

Réfrigéré

48h

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Préparation	Centrifuger (minimum 2000g, 10min, 4°C) et décanter sans délai le
	plasma/sérum (vol. min. 0.2 ml). Préciser le type d'anticoagulant

plasma/sérum (vol. min. 0.3 ml). Préciser le type d'anticoagulant.

Conservation A T° amb : Sang complet max 48h ou plasma max 48h jusqu'à

réception au laboratoire.

Sinon congeler le plasma:Idéalement à -80°C, sinon à -20°C

Conditions d'acheminement Congelé

Ne pas envoyer le vendredi et veille de jours fériés

Recommandations d'envoi matériel HIV

Acheminement

Conditions d'acheminementRéception du matériel les jours ouvrables, le vendredi ou veille de jours

fériés jusqu'à 15h00.


Vérifier les délais de stabilité, sinon centrifuger et congeler le plasma

PP:439



Dépose des prélèvements	Réception des laboratoires
Site	BH18-100
Adresse	Bugnon 46 1011 Lausanne
Pneumatique	439
Horaire d'ouverture de la réception	24h/24
Téléphone	021 31 44 280
Site web	Réception des laboratoires 24/24.
Analytique	
Prestataire	
Prestataire	Laboratoire de pharmacologie clinique
Site	BH18-100
Adresse	Rue du Bugnon 46 BH18-218 1011 Lausanne
Tube pneumatique	439
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h15 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 44 271
Résultats	
Interprétation	<48h dès résultat
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS



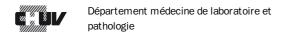

Post analytique

Conservation après examens

Prélèvement primaire	6 jours
Aliquote congelé	2 semaines
Tarif	
Tarif (CHF)	144
Prestation Tarmed	Si interprétation pharmacologique: 3.60 CHF par période de 1 min

