
Catalogue des analyses - Laboratoire

Morphine

Sang



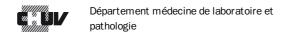

Informations générales

Examen

But de l'analyse	Dosage et interprétation pharmacologique du taux sanguin
Indication diagnostique	Réponse insatisfaisante, effets secondaires, interactions, doute sur l'adhésion, suspicion d'intoxication
Renseignement téléphonique	021 31 42 264
Horaire de réalisation	Heures ouvrables du laboratoire
Fréquence d'exécution	2x/semaine
Analyse accréditée	OUI
Spécialité	Dosages de médicaments
Prescription	
Formulaire de demande	Numéro de commande Lien UPPC - Analyse de médicaments psychotropes
Renseignements à fournir	Remplir scrupuleusement toutes les rubriques



Pré analytique

Prélèvement

• Sang veineux

Instruction(s) particulière(s)Prélèvement juste avant la prise du médicament.

Délai d'équilibration après dernier changement de posologie : 4 jours

Matériel standard

Quantité 1

Contenant Tube 2.6 ml EDTA-K



Monovette ISO bouchon VIOLET - N° commande: 999009

Contenant(s) autre(s)

Sang hépariné ou sérum sans gel séparateur aussi utilisable

Stabilité maximale avant envoi

Réfrigéré Nuit et we

Traitement du prélèvement pour requérants externes

Centrifuger et décanter **Préparation** 4°C Conservation Température ambiante, courrier A **Conditions d'acheminement Acheminement** Site de Cery: Amener directement au laboratoire UPPC **Conditions d'acheminement** Site de CERY: Réception du laboratoire de pharmacogénétique et Dépose des prélèvements psychopharmacologie clinique (UPPC) Site du CHUV : Réception des laboratoires BH 18-100 Hôpital de Cery Site Cery **Adresse** 1008 Prilly



Horaire d'ouverture de la réception	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264
Site web	UPPC Pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique
Analytique Prestataire	
Piestatalie	
Prestataire	Laboratoire de pharmacogénétique et psychopharmacologie clinique (UPPC)
Site	Hôpital de Cery
Adresse	Hôpital de Cery 1008 Prilly
Horaire d'ouverture du laboratoire	Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00 Samedi, dimanche et jours fériés : fermé
Téléphone	021 31 42 264
Méthode analytique	
Principe de la méthode	• HPLC-MS/MS
Post analytique	

Conservation après examens

Aliquote congelé 3 mois

Tarif

Tarif (CHF)

