

## Catalogue des analyses - Laboratoire

# ADAMTS-13 (test rapide CHUV)

## Informations générales

### Examen

#### But de l'analyse

Est utile pour le diagnostic du Purpura Thrombotique Thrombocytopénique (TTP) et pour le différencier d'un syndrome hémolytique urémique (SHU)  
Toujours en accord avec l'hématologue.  
Indiquer le diagnostic et la thérapie (date des plasmaphérèses).  
En cas de résultat pathologique, un échantillon sera envoyé au laboratoire de référence de l'Inselspital de Berne pour confirmation (méthode FRET).

#### Renseignement téléphonique

021 31 44206

#### Horaire de réalisation

Heures ouvrables du laboratoire

#### Fréquence d'exécution

1x/jour

#### Analyse accréditée

OUI

#### Spécialité

- Hémostase

#### Synonyme

ADAM, ADAMTS13, ADAMTS-13

#### Prescription

#### Formulaire de demande

##### Numéro de commande

999071

##### Lien

[023 - Hématologie hémostase](#)

## Pré analytique

### Prélèvement

#### Nature

- Sang veineux

#### Matériel standard

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 3 ml citrate de sodium



Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998993


#### Matériel pédiatrique

#### Quantité

2

#### Contenant

Tube 1.4 ml citrate de sodium

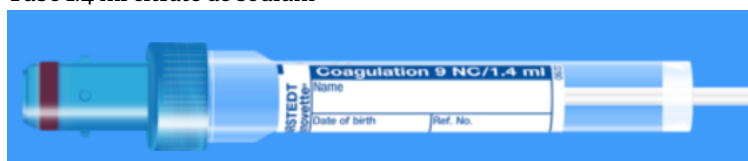

Monovette ISO bouchon BLEU – N° commande : 998998

### Stabilité maximale avant envoi

#### Ambiant

4h

#### Réfrigéré

8h si plasma séparé

### Traitement du prélèvement pour requérants externes

#### Préparation

Aucune si le délai entre la prise de sang et l'arrivée au Chuv est < 3 heures  
sinon  
Centrifuger 2x 10 min à 1800g et faire 1 aliquot

#### Conservation

Aliquots à -20°C

#### Conditions d'acheminement

Lundi au vendredi par coursier ou courrier express sur glace sèche pour les aliquots congelés

#### Acheminement

#### Dépose des prélèvements

Réception des laboratoires



<b>Site</b>	BH18-100
<b>Adresse</b>	Bugnon 46 1011 Lausanne
<b>Pneumatique</b>	439
<b>Horaire d'ouverture de la réception</b>	Lundi-vendredi : 6h30-18h30 Samedi : 6h30-15h30 Dimanche et jours fériés : 6h30-12h00
<b>Téléphone</b>	021 31 44 280
<b>Astreinte</b>	En dehors de ces heures, réception 24/24H par le personnel de garde des laboratoires LCC-LCH
<b>Site web</b>	<u><a href="#">Réception des laboratoires</a></u>

## Analytique

### Prestataire

**Prestataire** Laboratoire central d'hématologie Hémostase spéciale

**Site** BH18-100

**Adresse** Rue du Bugnon 46  
1011 Lausanne

**Tube pneumatique** 439

**Horaire d'ouverture du laboratoire** Lundi -> vendredi : 8h00 à 17h00  
Samedi, dimanche et jours fériés : 7h00 à 12h00

**Téléphone** 021 31 44 206

**Astreinte** Hémato moléculaire-hémostase

### Résultats

**Délai de rendu** < 8h

### Méthode analytique

**Principe de la méthode** • ECL

**Analyseur** Bioflash

## Post analytique

### Conservation après examens

**Aliquote congelé** 6 mois

### Tarif

**Tarif (CHF)** 198