

Procédure de soin

# Dispositif anal de contrôle de l'incontinence fécale

Adulte

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP).

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

## Contexte

### Résumé

Le dispositif d'insertion pour l'incontinence fécale est indiqué pour la prise en charge des fuites accidentelles de selles dues à l'incontinence fécale. **Si l'incontinence fécale est liée à des diarrhées importantes, ce dispositif n'est pas la solution à envisager.**

**Celui-ci se pose sur prescription médicale.**

Le dispositif peut être porté sans interruption jusqu'à 24 heures.

**L'applicateur en plastique blanc rigide DOIT être retiré une fois le dispositif inséré et en place**

### Définition

Dispositif de contrôle de l'incontinence fécale consistant en un insert souple, flexible et rempli de liquide, visant à prévenir les fuites involontaires de selles liées à l'incontinence fécale. Le dispositif n'est pas stérile et est destiné à un usage unique.

## Indications

Le dispositif d'insertion pour l'incontinence fécale est indiqué pour la prise en charge des fuites accidentelles de selles dues à l'incontinence fécale. **Celui-ci se pose sur prescription médicale.**

Le dispositif peut être porté sans interruption jusqu'à 24 heures.

Si l'incontinence fécale est liée à des diarrhées importantes, ce dispositif n'est pas la solution à envisager.

## Contre-indications

- Selles sanguinolentes ou saignements du rectum
- Hémorroïdes saignantes
- Douleur anale/rectale, irritation, spasmes, déchirure ou fissure.
- Chirurgie rectale au cours des 4 dernières semaines.
- L'insert pour l'incontinence fécale est contre-indiqué pour une utilisation dans la population pédiatrique.

## Risques

### Expulsion inopinée ou fuites

#### Prévention et attitude

Adaptation du dispositif à une taille supérieure

### Dispositif endommagé

#### Prévention et attitude

- Dispositif à usage unique. La réutilisation du dispositif pourrait entraîner sa rupture
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé

### Allergie au silicone

#### Prévention et attitude

- Ne pas utiliser en cas d'allergie au silicone

## Technique de soin

### Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Gel lubrifiant stérile (Type : KY®)
- 1 Boîte de gants non stériles
- 1 Lingettes imbibées de solution nettoyante (Type : Sinaqua™)
- 1 Dispositif anal de contrôle de l'incontinence fécale

### Préparation du soin

#### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Installer le patient dans une position confortable et décontractée

## Déroulement du soin

### Prérequis


Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

### Insertion du dispositif anal :

- Mettre des gants non-stériles
- Nettoyer le siège et les plis cutanés avec une lingette neutre SINAQUA™
- Changer de gants non-stériles
- Ouvrir l'emballage du dispositif et sortir le dispositif anal
- Prendre l'applicateur et le système de retenu (A)
- Aligner le dispositif sur l'anus
- Insérer délicatement le dispositif anal (B) jusqu'à ce que le système de retenue se trouve contre l'anus (C)
- Retirer l'applicateur (D) et jetez-le.

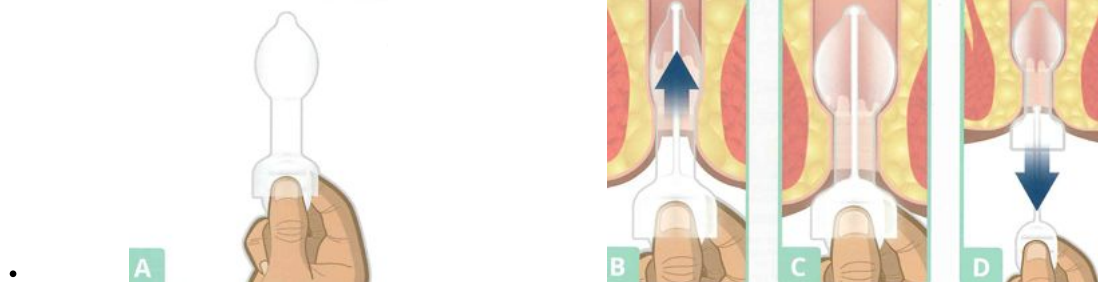

### Retrait du dispositif anal :

- Mettre des gants
- Attraper la partie externe du système de retenue et tirer délicatement pour retirer le dispositif (E)



- Jeter le dispositif dans un sac.

Il n'est pas recommandé de jeter le dispositif ou l'applicateur dans les toilettes.

## Suivi du patient

### Surveillances

- Evaluer le système cutané

- Être attentif aux plaintes du patient : Evaluer le vécu de la personne (douleur, gêne importante) et l'efficacité du dispositif anal sur la continence :
  - Si la personne ressent une gêne ou des douleurs, enlever le tampon
  - En cas d'écoulement fécal liquide autour du dispositif (fuite), enlevez-le et réévaluer si besoin d'une taille supérieure
- Réévaluation régulière du protocole mis en place

### Activités de la vie quotidienne

- **Elimination**
  - Le dispositif a été conçu afin de pouvoir être expulsé au cours des selles ou de manière manuelle. Pour des raisons de commodité, il est recommandé de retirer le dispositif avant d'aller à la selle.

### Enseignement au patient et proches

Si un retour à domicile est programmé et le besoin d'un dispositif de contrôle de l'incontinence fécale pourrait s'avérer utile et/ou nécessaire, prière de contacter le centre de stomathérapie pour assurer une suite de prise en soins et d'éducation.

### Retour à domicile

- Centre de stomathérapie : 079 556 06 19
- Cellule Plaies et cicatrisation : 021 314 24 98

### Personnes ressources

Cellule Plaies et cicatrisation : 021 314 24 98 / [cellule.plaies@chuv.ch](mailto:cellule.plaies@chuv.ch)

### Références

1. Wellspect HealthCare. Mode d'emploi Navina™ Fecal Incontinence Insert [document technique]. Mölndal (Suède) : Wellspect HealthCare; [s.d.].
2. Bueno K, Davé-Heliker B. Mechanical inserts for the treatment of faecal incontinence: a systematic review. Arab J Urol. 2019;17(1):69–76. doi:10.1080/2090598X.2019.1589776
3. How P, Trivedi PM, Bearn PE, Thomas GP. Insert devices for faecal incontinence. Tech Coloproctol. 2021;25(3):255–65. doi:10.1007/s10151-020-02317-3

Date de validation	Auteurs	Experts
15.07.2024	Centre de Stomathérapie, Plaies et cicatrisation, Lausanne CHUV	Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV HPCi-CHUV, Hygiène prévention et contrôle de l'infection