

Procédure de soin

# Système de drainage Thopaz+ / Arrêt du traitement

Transverse (Communes Adulte/Pédiatrie)

## Généralités

### Avertissement

La responsabilité du CHUV et des auteurs ne peut être engagée en cas d'utilisation de ce document en dehors du cadre prévu au CHUV. L'adoption de ces techniques de soins par une autre institution relève de la responsabilité de sa direction. Tout soin nécessite des connaissances appropriées et ne peut donc être exécuté que par des professionnels qualifiés. La forme et le contenu de ce document peuvent faire l'objet d'amélioration continue ou d'évolution dans les versions futures. Seule la version électronique fait foi.

### Cadre de référence

Précautions Standard / Hygiène des mains

Hygiène, prévention et contrôle de l'infection (HPCI)

REFMED

Catalogue des examens

Tableau des antiseptiques au CHUV

Tableau des désinfectants au CHUV

Directive institutionnelle : Bonnes pratiques de documentation et de tenue du dossier patient du CHUV

Directive institutionnelle : Identitovigilance et port du bracelet d'identification des patients (BIP).

Directive institutionnelle : Gestion de la douleur

Directive institutionnelle : Gestion des médicaments : Préparation, double-contrôle et administration des médicaments

**Attention ! Ce protocole s'applique à l'ensemble des services adultes et pédiatriques du CHUV, hors néonatalogie**

## Recommandations pour l'utilisation des dispositifs médicaux (DM) au CHUV

### 1. Vérification et utilisation des DM

- Assurez-vous d'utiliser uniquement les dispositifs médicaux certifiés et vérifiés mis à disposition par le CHUV.
- Familiarisez-vous avec le procédé de mesure spécifique à chaque DM que vous utilisez

### 2. Contrôle technique et qualité

- Consultez systématiquement la vignette de contrôle technique sur chaque DM pour vérifier la date du prochain contrôle
- Soyez conscient que certains DM font l'objet de contrôles qualité spécifiques réalisés par chaque service de soins

### 3. État des DM et accessoires

- Examinez attentivement l'état du DM et de ses accessoires avant chaque utilisation
- Assurez-vous que le DM et ses accessoires sont compatibles et adaptés à chaque patient

### 4. Précautions lors de la mesure

- Prenez en compte la situation physiopathologique du patient avant d'interpréter les valeurs affichées par le DM
- Effectuez une évaluation clinique approfondie du patient en complément de la mesure.
- Appliquez votre connaissance du procédé de mesure pour vérifier l'exactitude des valeurs affichées par le DM.

En suivant ces recommandations, vous contribuerez à garantir la fiabilité des mesures et la sécurité des patients.

**L'application de cette procédure de soin spécifique requiert la lecture préalable de la procédure générique, accessible dans la section Contexte ci-dessous.**



## Contexte

### Systeme de drainage Thopaz+

## Technique de soin

### Matériel

- 1 Solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains
- 1 Boite de gants non stériles
- 1 Chlorhexidine alcoolique 2%
- 3 Compresse(s) stérile(s)
- 2 Pince à clamer (Grande)
- 1 Thopaz+®
- 1 Bocal pour le Thopaz+® 300ml ou 800ml
- 1 Valve de Heimlich Lorsque le drain reste en déclive
- 1 Boite de masques de protection Lors de l'ablation du drain
- 1 Paire de gants stériles Lors de l'ablation du drain
- 1 Boite de gants non stériles Lors de l'ablation du drain
- 1 Protection pour le lit Lors de l'ablation du drain
- 1 Set à pansement Lors de l'ablation du drain
- 1 Coupe-fil stérile Lors de l'ablation du drain
- 1 Pansement film transparent avec compresse intégrée (Type : Tegaderm®/Opsite®) Lors de l'ablation du drain
- 1 Médicament(s) prescrit(s) Antalgie Lors de l'ablation du drain
- 1 Bétadine® pommade

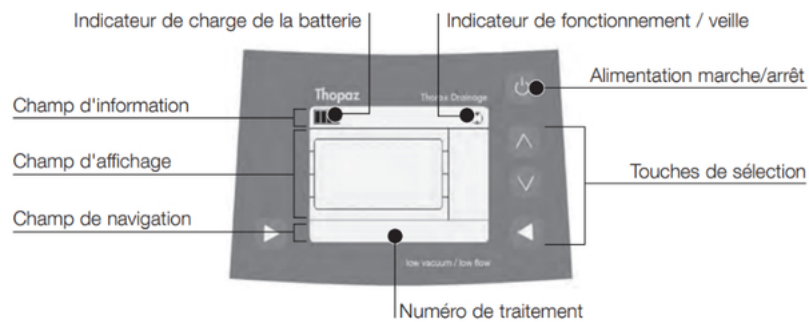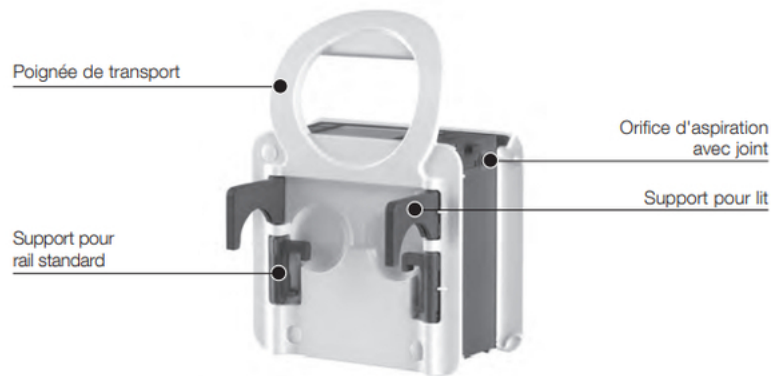

## Préparation du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

## Hygiène des mains


A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

### Arrêt du système d'aspiration Thopaz+

- Clamper le drain avec les deux grandes pinces à clamper
- Clamper la tubulure de l'appareil
- Arrêter le Thopaz+ en appuyant sur « stand-by »
  -



- Eteindre le Thopaz+
  -

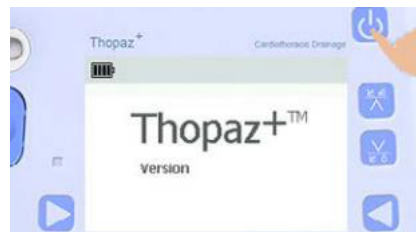

- Retirer et sceller le bocal
- Eliminer le bocal et la tubulure

## Déroulement du soin

### Prérequis

Le matériel nécessaire à la réalisation du soin est déposé sur une surface désinfectée avec une lingette imprégnée du désinfectant usuel au CHUV (plateau inox, chariot de soin, plan de travail, etc...).

## Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- **Débranchement du drain**
  - Imbiber une compresse stérile d'antiseptique alcoolique à base de Chlorhexidine 2%
  - Décoller la bande adhésive tissée de la connexion
  - Mettre une paire de gants non-stériles
  - Placer la compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique à base de Chlorhexidine 2% sous la connexion
  - Déconnecter le drain thoracique de l'unité de drainage
  - Désinfecter l'extrémité du drain thoracique à l'aide de la compresse stérile imbibée d'antiseptique alcoolique à base de Chlorhexidine 2% et le maintenir fermement au moyen de la compresse stérile
- **Lorsque le drain reste en déclive :**
  - Vérifier la valve de Heimlich et la raccorder au tuyau de drainage
  - Déclamper le drain thoracique dès que le raccordement est assuré
  - Retirer les gants
- **Lors de l'ablation du drain :**
  - Informer le patient et administrer l'antalgie prescrite
  - Préparer le chariot de soins avec le matériel nécessaire
  - Assister le médecin lors du déroulement du soin

## Finalisation du soin

### Hygiène des mains

A effectuer par friction hydro-alcoolique selon les 5 moments de l'hygiène des mains

- Documenter le soin dans le dossier informatisé du patient

## Suivi du patient

### Personnes ressources

Service de chirurgie thoracique, BH15, 42250

### Références

1. Medela. Thopaz: Thoracic Drainage Systeme. Mode d'emploi
2. Medela. Thopaz+ : Quick Card
3. Evans JM, Ray A, Dale M, Morgan H, Dimmock P, Carolan-Rees G. Thopaz+ Portable Digital System for Managing Chest Drains : A NICE Medical Technology Guidance. Appl Health Econ Health Policy. 2019;17(3):285-294. DOI: 10.1007/s40258-019-00461-y
4. Durai R, Hoque H, Davies TW, Managing a chest tube and drainage system : AORN J. 2010;91(2):275-80. DOI: 10.1016/j.aorn.2009.09.026
5. The Joanna Briggs Institute. Chest Drains : Monitoring : EBP Database ; 2022

## Liens

### Procédures de soins liées

#### Systeme de drainage Thopaz+

#### Drainage thoracique passif (Valve de Heimlich)

Date de validation	Auteurs	Experts
20.12.2022	Méthodes de soins, Direction des soins, Lausanne, CHUV	Céline Lomme, ICLS Marion Kovacs, ICLS CHT, CHUV Yaniss Belaroussi, médecin, Chef de clinique, CHT, CHUV Nicolas Jauquier, médecin associé, CHP, CHUV HPCi-CHUV, Hygiène prévention et contrôle de l'infection